



中国地区官方微信公众号

Clark技术支持&中国总代理

- ④ 上海佳色生物科技有限公司
- ☎ 电话：021-60510268
- ⑧ QQ：935261276 / 964068064
- ✉ 邮箱：china@clarkbio.com
- 📍 公司地址：上海浦东国际医学园区天雄路588弄3号楼4楼

这是一份独特的产品手册，每一款产品我们都将心注入

**要么独一无二 | 要么与众不同**

EITHER ALONE OR UNIQUE OR SOMETHING DIFFERENT

**CLARK**  
BIOSCIENCE



中国地区官方微信公众号

Clark技术支持&中国总代理

- ④ 上海佳色生物科技有限公司
- ☎ 电话：021-60510268
- ⑧ QQ：935261276 / 964068064
- ✉ 邮箱：china@clarkbio.com
- 📍 公司地址：上海浦东国际医学园区天雄路588弄3号楼4楼

这是一份独特的产品手册,每一款产品我们都将心注入

**要么独一无二 | 要么与众不同**

EITHER ALONE OR UNIQUE OR SOMETHING DIFFERENT

## Clarkbio包装再次升级

小规格产品全部采用原产美国的高透明乐扣小盒  
主要规格为115\*85\*28mm和105\*75\*26mm

玲珑剔透，清新方正  
简约规整，心情好，实验顺！

玲珑剔透

清新方正

简约规整

## 转染试剂

Transfection Reagent

Clark转染试剂是阳离子聚合物类型的转染试剂,相比脂质体类型具有更小的细胞毒性/更高的转染效率, 以及更高的可重复性。

### Step1.Dilution



DNA



Step2.Mix

Clarkfection



step3.Incubate and detect



Incubate the DNA and Clarkfection for 15-20min at room temperature.Add transfection mixtures into cells



Clark转染试剂 1ml ¥1290

## Clark血清-中国市场第一放心品牌

Clark serum - the Chinese market first assured brand

### 我们如何让客户放心

01 每一个批号的血清都在国内使用20个以上的细胞株检测

每一瓶血清都增加特殊黄色外袋,防擦防撞防光照,保温保洁保蛋白多一层保护  
质量更稳定

03 每一瓶血清都经过多层次防伪包装设计,并且有中奖反馈信息,保证无假货

每一瓶血清都有独特的身份信息,国内渠道通畅,购买方便,全程溯源杜绝假货

05 在中国地区发现假冒产品,有重奖

## Clark血清-中国市场第一放心品牌

Clark serum - the Chinese market first assured brand



特殊黄袋装血清



透明铁盒试用装


货号	品名	规格	
FB15011	优等胎牛血清	100ml	大量现货
FB15015	优等胎牛血清	500ml	大量现货
FB25011	特级胎牛血清	100ml	大量现货
FB25015	特级胎牛血清	500ml	大量现货
FB35011	透析型胎牛血清	100ml	大量现货
FB35015	透析型胎牛血清	500ml	大量现货
FB45011	活性炭处理胎牛血清	100ml	大量现货
FB45015	活性炭处理胎牛血清	500ml	大量现货
FB55011	ES细胞专用胎牛血清	100ml	大量现货
FB55015	ES细胞专用胎牛血清	500ml	大量现货
NBC15015	特级新生牛牛血清	500ml	大量现货

## ④ Clark一步法支原体检测试剂盒

Clark One - step Mycoplasma Detection Kit

世界上第一个一步法支原体检测产品——Clark一步法支原体检测试剂盒  
只要1ul细胞培养上清,一个步骤一小时肉眼看结果!

T02 一步法支原体检测试剂盒 50T **¥ 2392**

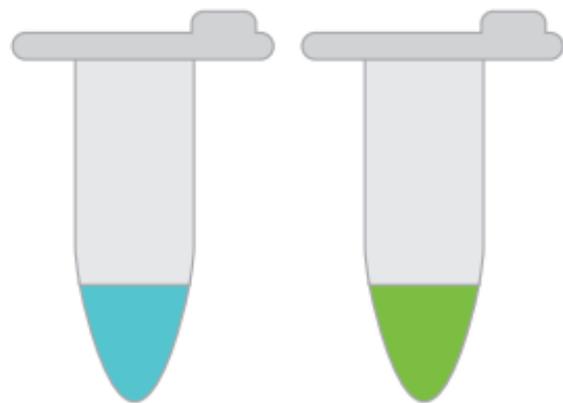

## ④ 实验室清洁技术的革命

Laboratory Clean Technology Revolution

每一种支原体杀手 (Mycokiller) 均含有抑制支原体DNA复制和支原体蛋白合成的两种化学物质  
迄今毒性最低的杀支原体产品

E201&E202 支原体杀手 **1ml ¥ 1192**


### 实验室清洁技术的革命

全新一代实验室清洁剂——LabCleaner, 强力杀灭各种微生物, 1分钟见效!  
现在购买, 免费送绝美hello kitty喷壶!

C301 实验室清洁剂手 **10\*1g ¥ 498**




## ④ 预染色蛋白marker Prestained protein marker

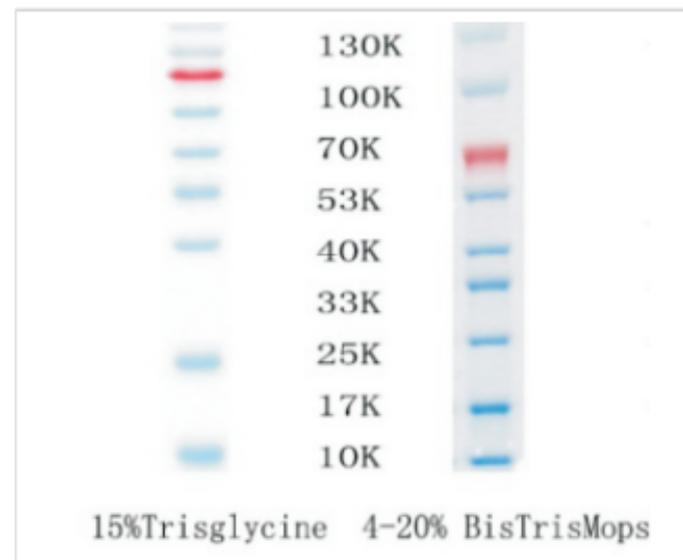

Clarkbio预染蛋白条带清晰锐利，使用前不需要加热、稀释或添加其他试剂，即开即用

预染色蛋白marker 250ul\*2 ¥ 480

## ④ 曝光Marker (Western blot 必用产品)

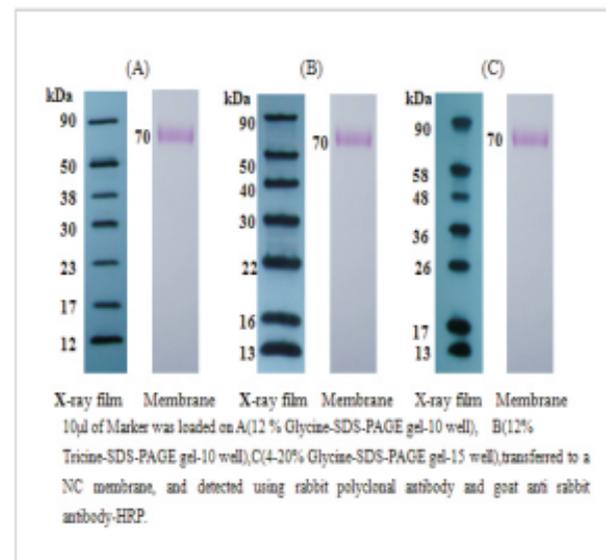


普通Marker只使用到转膜步骤，曝光Marker能够在X胶片上曝光显色。因此，曝光Marker作为对照，能够提示解决Western blot试验中的一切问题。

M201,曝光Marker 100ul, ¥ 400.00

M210,曝光Marker 1250ul, ¥ 3200.00

问题	原因
背景较高	封闭不充分
	印迹膜或转膜缓冲液被污染
	一抗稀释倍数不当
	一抗孵育时的温度较高
信号弱 或者无信号	曝光时间过长
	ECL工作液不工作
	转移不完全或者过转移
	抗体无效或者孵育时间过短
条带太浓 或者太杂	Marker上样量较低
	抗体或Marker过量
	非特异性结合
	曝光时间过长

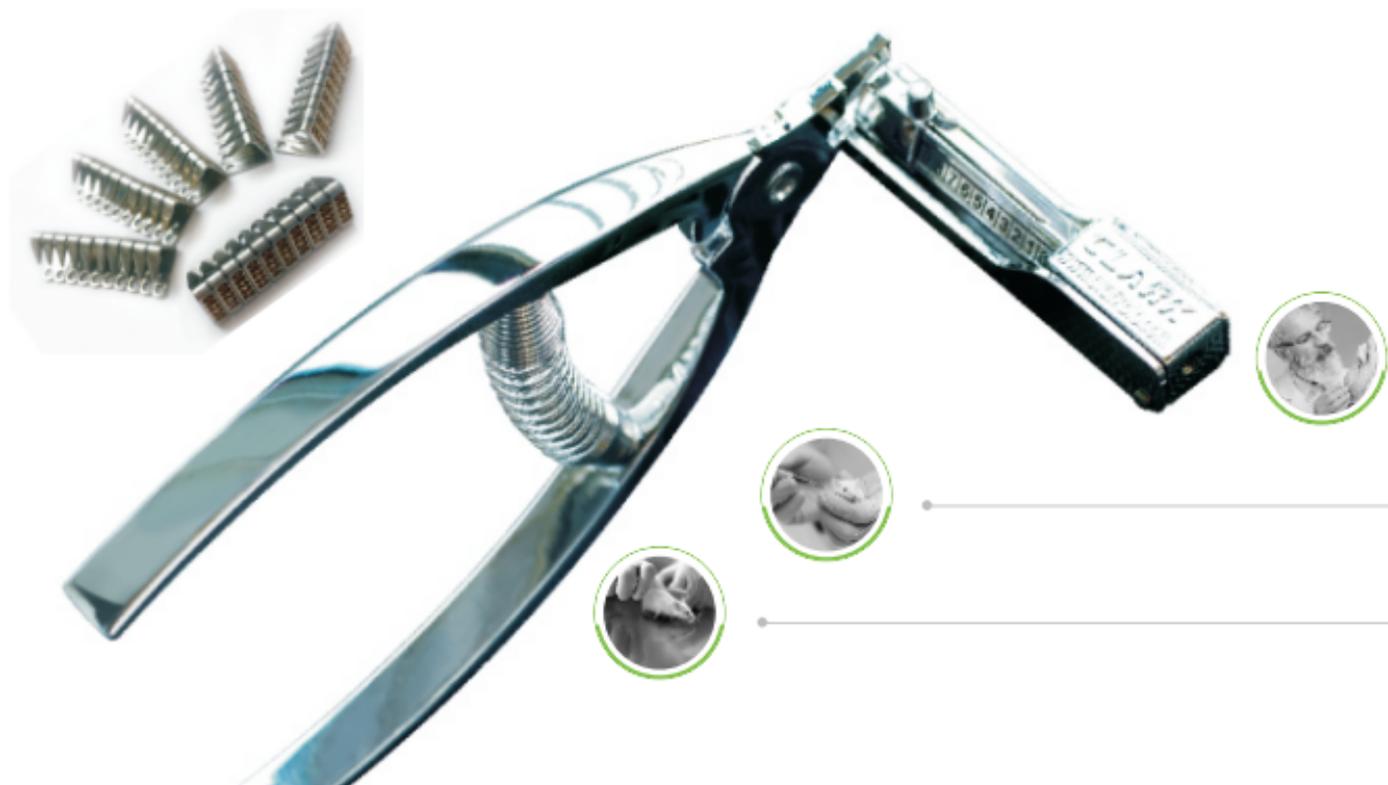

## 耳标钳

Smart tager

Smart tager是一款革命性的产品,是世界上第一把连续工作的耳标钳,完全颠覆了传统的标记方式

### 主要特点

- 01 一排10只耳标钉,可连续标记10只动物,效率提高5倍以上
- 02 316不锈钢耳钉,采用3位和5位数字激光编码/准确区分每只动物
- 03 适用于小鼠/大鼠/豚鼠/鱼/鸡/鸭等小动物耳标穿刺标记

ST101,连续耳标钳 **¥1500/把**

ST201,小动物10联排耳标,5位数字激光标记 **100只/盒 ¥280**

ST202,小动物10联排耳标,5位数字激光标记 **1000只/盒 ¥1600**

这是一份独特的产品手册,每一款产品我们都将心注入